


Jak używać


1 Wyczyść SenzeBand 2

Użyj wilgotnej chusteczki, aby usunąć kurz i brud, który może wpływać na czujniki w SenzeBand 2, aby poprawić łączność i utrzymać dokładność.

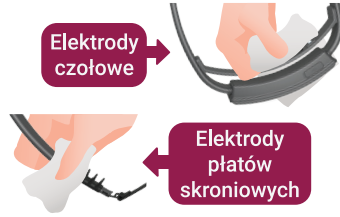


2 Zwiększanie łączności

Przetrzyj czoło i obszar nad uchem. Zalecane są chusteczki bezalkoholowe.

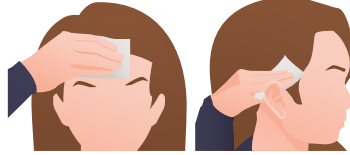

3 Włącz Bluetooth

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu mobilnym. W przypadku urządzeń z systemem iOS i Android przejdź do opcji Ustawienia > Bluetooth.

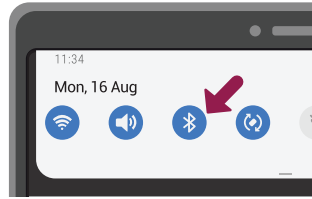

4 Włączanie SenzeBand 2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik LED Power wskazuje poziom baterii SenzeBand 2. Domyślnie emituje niebieskie światło (wystarczające) i zmienia kolor na zielony po podłączeniu do aplikacji mobilnej, natomiast czerwone światło (wymaga ładowania) pozostaje czerwone.




5 Podłączenie urządzenia

SenzeBand 2 może być wyłącznie podłączona do twojego urządzenia mobilnego poprzez mobilne aplikacje Neeuro. Na twoim urządzeniu mobilnym, wyszukaj 'Neeuro' w App Store od Apple lub Google Play Store i wybierz swoją aplikację, aby ją ściągnąć. Przy uruchamianiu aplikacji, idź do Ustawienia > Urządzenia > Dodaj Urządzenie, podążając za instrukcjami i połącz się z SenzeBand 2.



6 Załóż SenzeBand 2

Umieść SenzeBand 2 około ciała nad brwiami. Wyreguluj elastyczny pasek na głowę, aby uzyskać wygodne dopasowanie. Źle dopasowany SenzeBand 2 może powodować niedokładne odczyty lub niestabilne połączenie.

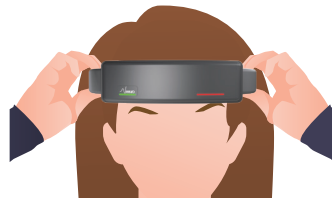


7 Regulacja SenzeBand 2

Aby uzyskać najlepszą łączność, upewnij się, że czujniki dobrze przylegają do skóry, unikając wszelkich włosów pomiędzy nimi.



8 Sprawdzenie łączności

W aplikacji przejdź do opcji Ustawienia > Urządzenie. Powtarzaj krok 7, aż wskaźniki czujników w aplikacji zmienią kolor na zielony.

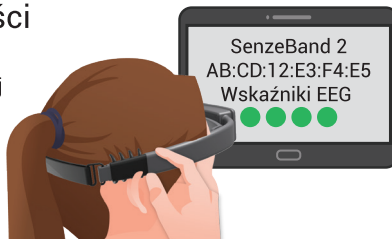

Co jest zawarte



O SenzeBand 2



Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Nie należy używać urządzenia SenzeBand 2 w mokrych warunkach lub podczas deszczu. W przypadku zamoczenia SenzeBand 2 należy odłączyć wszystkie kable i wyłączyć urządzenie. Poczekaj, aż SenzeBand 2 całkowicie wyschnie, zanim naciśniesz przycisk zasilania, aby ponownie włączyć SenzeBand 2. Nie próbuj suszyć SenzeBand 2 przez zewnętrzne źródła ciepła, takie jak suszarki do włosów. Nie wystawiaj SenzeBand 2 na działanie ekstremalnego ciepła lub zimna. Jeśli potrzebna jest dalsza pomoc, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@neeuro.com.

Bezpieczeństwo baterii

Akumulator w SenzeBand 2 nie powinien być naprawiany ani wymieniany przez osoby trzecie. SenzeBand 2 należy ładować wyłącznie za pomocą kabla USB-C, takiego jak ten dołączony do opakowania.

Ostrzeżenie FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnik ten nie może być umieszczony w jednej lokalizacji ani nie może pracować w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Zgodność z WEEE

Opaski SenzeBand 2 nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. SenzeBand 2 musi zostać usunięty poprzez zorganizowanie zwrotu do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Wydzielenie i recykling SenzeBand 2 w czasie utylizacji pomoże zachować zasoby naturalne i zapewni, że sprzęt zostanie poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzi i środowisko.

Informacje o gwarancji

Niniejsza gwarancja na SenzeBand 2 jest udzielana przez Neeuro Pte. Ltd. Gwarantuje ona SenzeBand 2 przed wadami materiałowymi i wykonawczymi w warunkach zwykłego użytkowania konsumenckiego przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. W okresie gwarancyjnym, jeśli w SenzeBand 2 wystąpi wada, Neeuro Pte. Ltd., według naszego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo, albo (i) naprawi SenzeBand 2 używając nowych lub odnowionych części albo (ii) wymieni SenzeBand 2 na nowy lub odnowiony SenzeBand 2, który jest równoważny z SenzeBand 2, który ma być wymieniony. Wszystkie wymienione części lub zwrócone SenzeBand 2 stają się własnością Neeuro Pte. Ltd.

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie komponentów sprzętowych SenzeBand 2, które nie były narażone na wypadek, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, pożar lub inne przyczyny zewnętrzne, przeróbki, naprawy lub wykorzystanie w celach komercyjnych.

Neeuro Pte. Ltd. (Reg: 201302274H)

100H Pasir Panjang Road,
#04-03 OC@Pasir Panjang
Singapur 118524

support@neeuro.com

Podręcznik użytkownika

